

EVEREST & JENNINGS

エベレスト アンド ジェニングス社製(車椅子)




世界の最高級品がやってきました。



Universal Models (ユニバーサル)

最高級形「プレミア」につぐモデルとして生まれたのが「ユニバーサル」です。
E・J車椅子の全ての長所が標準化されていますから、
どんなご要望にもお応えできます。
このモデルはその性能と価格の点で世界で最も多く使用され、
「プレミア」と並ぶ評価を得ています。
拳上式レッグレスト(互換性のある)みごとに調和したアームレストや
バックシートは、ほとんどの車椅子利用者の要求を満たすでしょう。
標準形と軽量形の両方から
アダルトサイズと
ナローアダルトサイズが選べます。

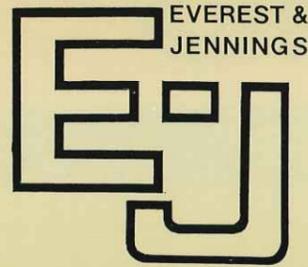

が創ったスチール製 車椅子の道……

1918年ハーバート・A・エベレストは鉱山事故にあって対麻痺患者となりました。
エベレスト氏は間もなく車椅子を唯一の頼りとする生活に入りましたが、彼は当時の正に「監禁物」であった木製車椅子の
不自由さがまんでできず、持前の創造力を働かせて自分にぴったりした自由に動ける車椅子の製作にとり掛かりました。
親友ハリー・C・ジェニングスもこの時からエベレストの良き協力者としてあらゆる困難の道を共に歩むことになったのです。
それまで世に存在しなかった金属製車椅子は彼等の理想でした。
「軽量で小形、機動力があってその上頑丈で、折り畳むこともできて、デザインも美しい」——など、
当時考えられもしなかった車椅子が二人の手で完成し、街路に初めて現われた時の人々の驚きは、
今では想像すらできません。個人の家庭を手始めに身体不自由者への福音——金属製車椅子は病院はもちろん、
学校から事務所に至るまで、世界中でまたたく間に使われるようになりました。
エベレストとジェニングスは、
こうしてよりすぐれた製品の開発を続けるために、Everest & Jennings社を設立し、
身体不自由者へ多くの自由と生活の楽しみを与えるために今日まで無数の独創的な製品を作り続けてきました。
「すぐれた製品を作る」——これがE・Jの理念です。

●酒井は信頼のおけるE・Jの車椅子をおすすめします

およそ車椅子に関する限りE・Jの製品ほど豊富な経験によって作られ、しかも多くの車種が揃っている例は他にありません。
酒井では、現代最新形のすぐれた車椅子をより広範囲の使用者に提供するため、
他に先がけて日本での紹介販売に踏み切りました。軽くて丈夫なことはもちろん、
どんな場合の要求にも確実に応じられる部品の組み合わせ、非の打ちどころのないシンプルなデザインなど、
車椅子の普及化が進むにつれてE・J製品はますますその威力を発揮するに違いありません。
酒井は自信を持ってE・J製品をおすすめいたします。



Hollywood Models (ハリウッド)

このモデルも、
世界中に普及しているすぐれた車椅子で、
品質・性能とも申し分ありません。
特に誰にでもお求め易い価格が好評を得ました。
フットレストとレッグレストは、
取り外しのできる鏡筒式互換性で長さの調節もできます。
また、セミリクライニングのバックシートや取り外し式アームレストは、
標準モデルの特長です。
サイズは、
アダルトサイズとナローアダルトサイズの2種類があります。

(トラベラー) Traveler Models

低価格モデルの中で最もすぐれた
折り畳み式車椅子です。
長さの調節ができる取り外し式フットレストと
拳上式レッグレストはいずれもがっちり固定され
しかも簡単に取り外しができます。
このモデルのサイズは
タイニトット(幼児用)
アダルトサイズ、ナローアダルトサイズがあり
ほかに便利な軽量形も用意されています。



5ラインにまとめた 豊かな機種……

Universal Models

Hollywood Models

Traveler Models

Starliner Models

Premier Models

(プレミヤ) Premier Models

車椅子界に革命をもたらしたE・Jが
技術の限りを尽くして製作したプレミアは
およそ車椅子に関して
完璧なできばえといわれてまいりました。
3500種にも及ぶ豊富な器種はもちろん
最高級の品質
磨き抜かれた工作技術など
どの点を取ってもE・Jの良心がうかがわれます。
どんな要求にも確実に応じられるプレミアこそ
その名に恥じない世界No.1の車椅子です。



(スターライナー) Starliner Models

このモデルは
できる限り低価格で製作するために
E・Jの全ての特長を
正確に標準化しました。
ですから機能的な不足は
全くありませんし
軽量で無駄を省いた手軽さは
一つの特長ともなっています。



●車椅子各部の名称

バックレスト
アームレスト
ハンドリム
ブレーキ
フットレスト
前輪



ヘッドレスト
デスクアーム
レッグレスト

E・J車椅子のほとんどの器種に次の2タイプがあります

●アダルトサイズ
(成人用)

●ナローアダルトサイズ
(狭巾成人用)

ユニバーサル・ハリウッド・トラベラー・スターライナー (記号解読キー)

製品等級 (ライン)	キャスター サイズ	椅子サイズ	特殊形	アームレスト	バックレスト	フットレスト・ レッグレスト
U (ユニバーサル)	8-8 インチ	A-成人用 (アダルトサイズ)	HE-半身不随者用 LW-軽量型	200-標準形 250-取り外し式	41-セミリクライニング (30°)	760-左右展開取り外し式フットレスト
		N-狭巾成人用 (ナローアダルトサイズ)	LD-軽量外出者用 空気タイヤ付 戸外機動性	260-取り外し式・ デスク形 25A-取り外し式・ 高さ調節 26A-取り外し式・ デスク形・高 さ調節	47-フルリクライニング (90°)	764-左右展開取り外し式レッグレスト
H (ハリウッド)	8-8 インチ 5-5 インチ	A-成人用 (アダルトサイズ)	なし	200-標準形 250-取り外し式	41-セミリクライニング (30°)	730-取り外し式鏡筒 形フットレスト
		N-狭巾成人用 (ナローアダルトサイズ)		260-取り外し式・ デスク形 25A-取り外し式・ デスク形・高 さ調節		734-取り外し式鏡筒 形レッグレスト
T (トラベラー)	8-8 インチ 5-5 インチ	A-成人用 (アダルトサイズ)	LW-軽量型	200-標準形	スタンダードのみ	740-引掛け取り付け 式フットレスト
		N-狭巾成人用 (ナローアダルトサイズ)				744-引掛け取り付け 式レッグレスト
S (スターライナー)	8-8 インチ	A-成人用 (アダルトサイズ)	TR-運搬車形	200-標準形	スタンダードのみ	700-長さ調節式レッ グレスト
		N-狭巾成人用 (ナローアダルトサイズ)				704-ボルト取り付け 式レッグレスト

プレミア (記号解読キー)

P	8	A	U	LD	260	33R	41	600	700
製品等級 (ライン)	キャスター サイズ	椅子サイズ	フレーム 形式	特殊形	アームレスト	駆動方法	バックレスト	堅牢耐久車 (ヘビーデュー ティー)	"足"支持法 (フットレスト・ レッグレスト)
P-プレミア	5-5 インチ 8-8 インチ	A-成人用 (アダルトサイズ) N-狭巾成人用 (ナローアダルトサイズ) J-ジュニアサイズ K-年少者 (K-ジュニアサイズ) G-成長形 T-タイニット (幼児サイズ)			25A-全長形(高さ調節取り外し式) 26A-デスク形(高さ調節取り外し式) 25R-全長形(転位式) 26R-デスク形(転位式) 25S-全長形(スポーツマンタイプ SM車のみ) 26S-デスク形(スポーツマンタイプ SM車のみ) 25W-全長形(後方ソケット巻き込み式) 26W-デスク形(後方ソケット巻き込み式) 27S-傾斜形(スポーツマンタイプ SM車のみ)	標準品(スタンダード)以外は (左-L・右-Rを指定のこと) 31-片手操作式 33-電動式(ソリッドステート) 34-電動式(マイクロスイッチ)	標準品(スタンダード)以外 41-セミリクライニング(30°) 44-部分の高さ指定 46-蝶番式 47-フルリクライニング(90°)	600台は堅牢耐久車のみ適用 616- 618- 620- 622- 624-	7XX-下肢切断者用 (フットレスト・レッグレストなし) 7TT-タイニット専用踏板 72T-室内専用フットレスト 710-マルチケヤー車用組立品 720-恒久支柱固定フットレスト 724-恒久固定レッグレスト (標準形アームレスト付けの場合) 754-恒久固定レッグレスト (取り外し式アームレストの場合) 770-左右展開取り外し式フ ットレスト 774-左右展開取り外し及び レッグレスト

製品の指定は「解読キー」を「覧の上お申込みください。」

Universal Models

ユニバーサル



U8A200-47-764

●フルリクライニング ●取り外し式挙上形レッグレスト
簡単な調節で90°の水平位まで自由な角度が得られるこのモデルは、寝台や救急運搬車にも早がわりします。レッグレストの角度もバックレスト同様水平位までのどの角度にも固定できますから、通常の場合の読書や仮眠、テレビを見る時などには最も快適な姿勢が得られます。また伸長10寸のヘッドレスト(取り外し可能)がついていて、背受けをゆったりと余裕あるものになっています。



U8A260-41-764

●セミリクライニング形(30°) ●取り外し式挙上形レッグレスト ★アダルトサイズ ★ナローアダルトサイズ
セミリクライニングのバックシートは、垂直位から30°傾斜までのどんな角度にも調節できます。左右に展開する取り外し可能な挙上式レッグレストは、左右別々に長さや角度が調節でき、しかも挙上部の支点は膝関節部とぴったり一致します。またレッグレストは柔らかいパッド張りになっていて、できるだけ楽に下肢の位置が定められるよう三様に調節できますし、不要の場合や旅行携行などの場合には、左右に開いて側面に密着させたり取り外したりすることもできます。




U8AHE200-760

●片マヒ用 ●取り外し式フットレスト

片マヒ患者用として特に製作されたこのモデルは、患者さんが一人で動かせる様設計されています。ハンドリムに楽に手がとどく配慮はもちろん、巾の狭い足受板は一本足でも操作できます。フットレスト(左右展開式)やレッグレスト(挙上式)は左右に展開させると、寝台及び浴槽などにぴったり接近できますし、普通サイズの机や食卓なら、アームレストの高さに合いますから接近してからの動作もスムーズにできます。長いブレーキハンドルは、少しの力で楽に操作するために効果的です。

Hollywood Models

ハリウッド

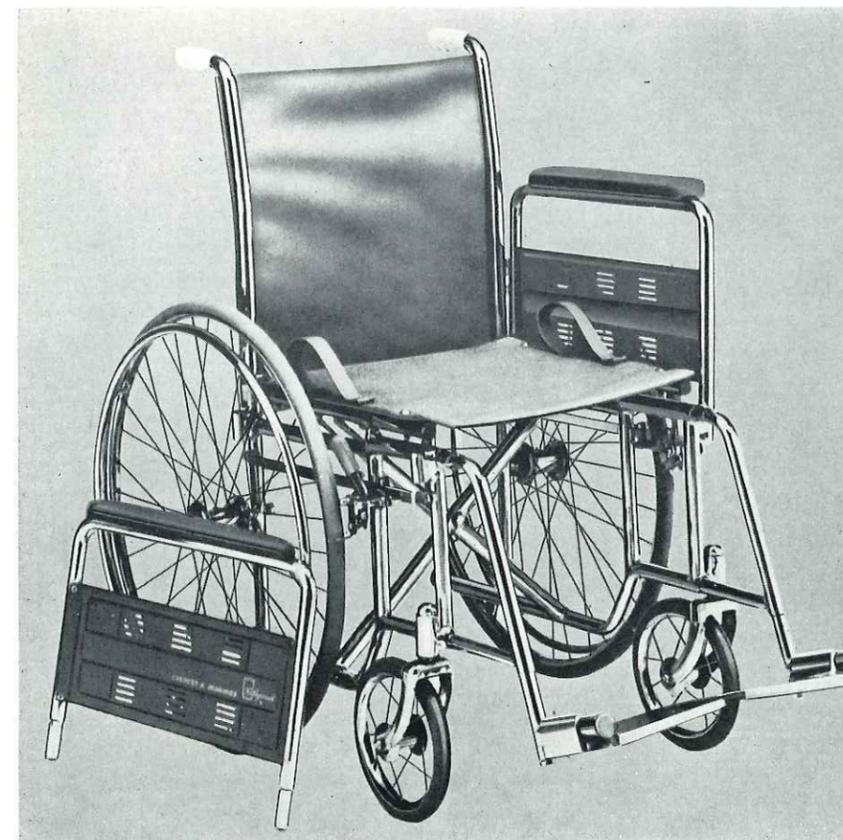

H8A250-730

●取り外し式アームレスト

左右のアームレストは、どちら側からでも乗り降りできるように取り外すことができます。この方式の利用の範囲は広く、ベッドからの移乗、作業台への側面からの接近や床に置かれた物の持ち上げ等に大いに役立てることができ、携行に便利な折り畳み式です。



H8A260-734


●取り外し式アームレスト

●デスクアーム

●取り外し式挙上形レッグレスト

Traveler Models

トラベラー

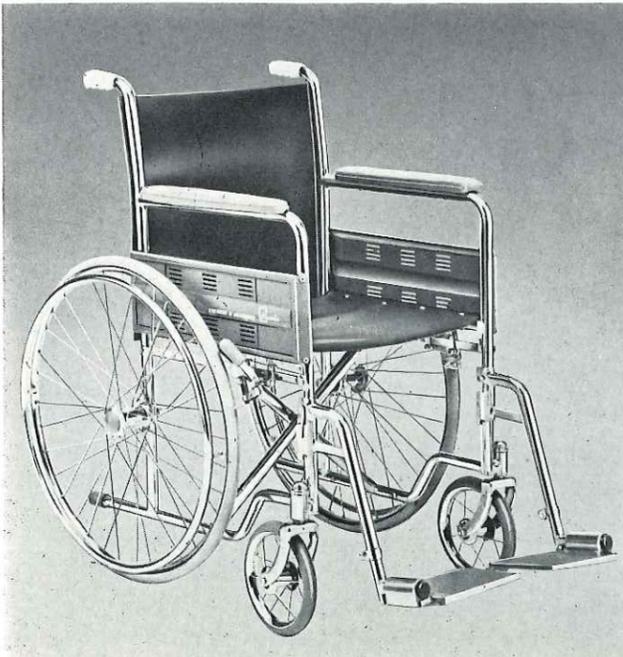

T8A200-740

●取り外し式フットレスト(前輪8吋)

トラベラーモデルの中でも標準品ともいえるこのモデルは、8吋の大きな前輪がついていてドアの敷居や一寸した障害物などを簡単に乗り越えることができます。取り外し式フットレストは、挙上式レッグレストと交換でき、取り外しも簡単でその上長さの調節もできます。キャストは5吋のものもあります。



T8ALW200-740

●取り外し式フットレスト ★軽量形

軽量モデルの便利さは何といっても軽ろやかな操作性と便利な携行性にあります。使用者だけでなく付添人にとってもこのメリットは共通といえましょう。アダルトサイズとナローアダルトサイズがあり、取り外し式フットレストと取り外しのできる挙上式レッグレストのいずれかが選べます。



T5T200-740

●タイニトット(幼児用) ●取り外し式フットレスト(前輪5吋)

小さい子供専用特に小型に設計してあります。子供達はこの椅子で驚く程よく動き廻り、活動範囲と種類をどんどん広げます。座席の高さは目を丁度良い位置に安定させ、手漕ぎリムは楽に手がとどきます。また手押しハンドルも付添人に最も便利な位置を選び、安全性が配慮されています。

Starliner Models

スターライナー




S8A200-700

●調節式フットレスト(前輪8吋)
最も低価格のこのモデルは、全てが規格化されていますが、製品の品質は他の系列のものに比べて何の遜色もありません。8吋から5吋のキャストが選べますし、長さの調節できるフットレストが、或いはボルト取り付け挙上式レッグレストなどの方式も指定できます。



S8N200-700

●ナローアダルトサイズ ●調節式フットレスト
瘦身の使用者の場合、体の安定をはかる為に特にこの狭巾モデルをおすすめします。

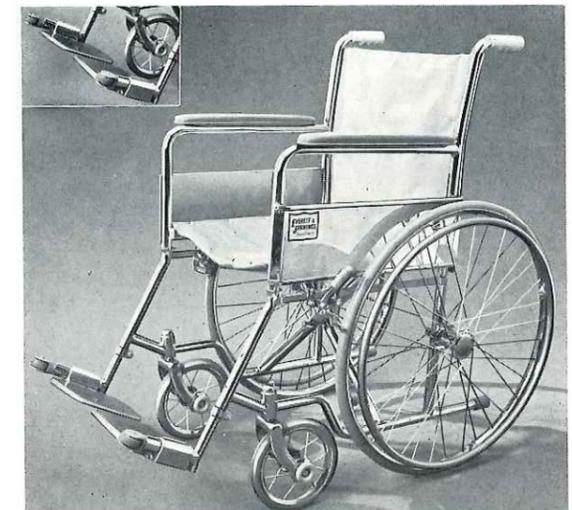

S8A200-700PP

●プロテクティブパッケージ付
●調節式フットレスト

室内や廊下の壁面で軽く方向転換ができるバンパーローラー付きです。ハンドリムとフットレストはソフトな手触りで冷えないビニールコーティング加工。

Premier Models

プレミア

P8AU200-770

●取り外し式フットレスト

このモデルの寸法は、ほとんどの大人の使用者に合うよう設計されています。行動範囲の広さを考慮して、大きな8吋全ボールベアリングキャスターが付き、敷居やちょっとした地上の障害物も何なく越えられます。

取外し式フットレストは寝台、浴槽、自動車の座席へ接近するために左右に開き、携行時には簡単に取り外せます。確実に利く安全ブレーキで、患者さんは安心して乗降することができます。



P8AULW200-770

●取り外し式レッグレスト

★軽量車

このモデルは一般成人向きに作られていますが、一度でもこの車椅子を使用するとその動きの軽さにはきっと驚かれることでしょう。

体重感が急になくなるような感じで、この椅子がいかにもすぐれているかを知ることができます。携行、車への乗り入れなどが楽なものこの機種ならではの特長です。活動的な成人の方にぜひおすすめしたい理想形といえるでしょう。



Premier Models

プレミア

P8AU260-770

●アームレスト(デスクアーム)

●取り外し式レッグレスト

このモデルのデスクアームは使用者の体が、事務机・食卓などに密着するまで近づくことができます。しかもアームレストを取り外すと左右のどちら側からでも乗降でき、更にこのアームレストを前後逆に取りつけますと、立ち上がる際の支えともなります。フットレスト・レッグレストは、左右展開式で簡単に取り外せます。組み入れレッグレスト固定器は標準装備。押し上げると固定器が開き指先ではじくと固定します。



P8AU200-31R-770

●片マヒ用(片手操作式)

片手運転椅子は、片腕又は片手の使えない人々のために作られました。大小2個のハンドリムを椅子の片側に取り付、外側の小さなリムは反対側の駆動輪に折り畳み式車軸によってつながっています。

両ハンドルを一所に握り合わせると、椅子は前後に直進し、一方のハンドリムだけを動かすと、使用したハンドリムに対応して、左反は右に転向します。このモデルには左手、右手操作があります。

★右手操作用

P8AU200-31R-770


★左手操作用

P8AU200-31L-770



Premier Models

プレミア

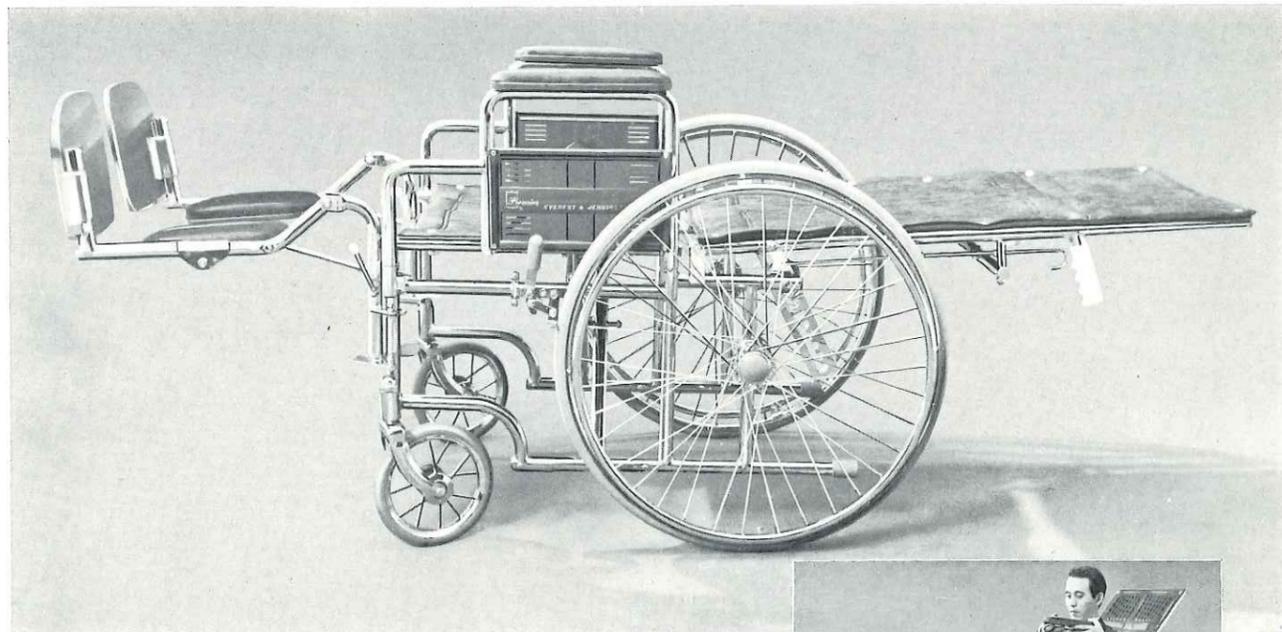

full-reclining

P8AU260-47-774


- フルリクライニング(90°)
- 挙上取り外し式デスクアーム

バックレストとレッグレストの調節機構がこの椅子をす早く確実に寝台、あるいは救急患者運搬車に変えてしまいます。このモデルの利用範囲は特に広く、背の傾斜とレッグレストの位置を中間にして腰又は膝関節に制限のある患者さんを乗せたり、いろいろなケースに使用できるよう調節が可能です。また、患者さんの姿勢を仰臥から座位に徐々に慣らせる助けとなりますから、リハビリテーション治療の補助器としても役立ちます。



Premier Models

プレミア

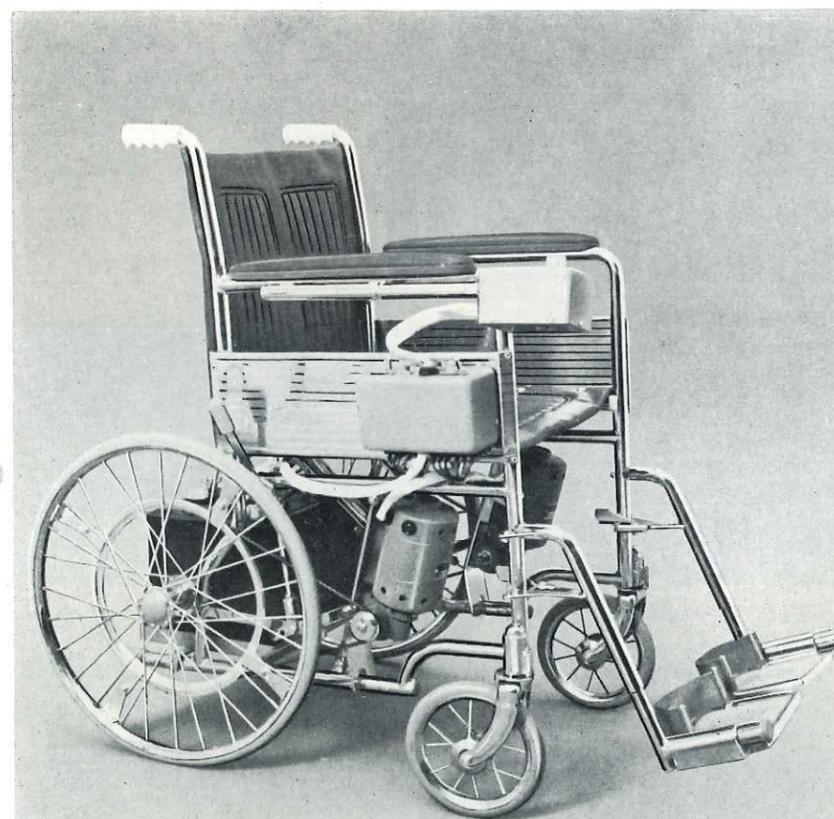

P8AU200-34-770

- 電動式マイクロスイッチ
- バッテリー・充電器付

電動式のメリットは枚挙にいとまがありませんが、一言でいえばその省力性につきます。正に車椅子の最高峰です。電動式34形は、速度と方向を一つのプッシュ式ツマミでコントロールできます。速度は毎時1.2kmから4.8kmまで御自由にお選びになれます。又手先の不自由な人やひどく震える人でも、「34」コントロールで一定の速度を得ることができます。一回の充電で約6～8時間はご使用になれ、一晩で充電ができます。

- ★右手操作用
P8AU200-34R-770
- ★左手操作用
P8AU200-34L-770

P8AUSM-27S-770

- 活動形軽量車・スポーツマン用

身体の不自由なスポーツマン向きに作られたこのモデルは、活動し易い軽量構造と一切の無駄をはぶいた鋭いスタイリングが最大の魅力です。この車椅子でのスポーツ活動は快適そのもので、球技・フィールド・トラックなどどんな場所でも優秀な成果が得られるでしょう。何ととってもシンプルなデザイン感覚が使用者を充分満足させますから、スポーツ好きの仲間がどんどん増えること間違いなしです。






POWER CART

MARK-20

●バッテリー充電器付

E・Jが開発したマーク-20〔パワーカート〕は、ますます大形化するこれからのリハビリテーション施設のための「新しい足」として、看護婦さんや医師の方におすすゝめします。各施設間の移動や離れた病棟への往診にこれほど便利な車はありません。すべてが手軽でコンパクトな電動式です。一本のハンドルで前進後進ができるのはもちろん、スピードや方向転換も全てこのハンドルで簡単に操作できます。足元は広く乗降の障害になるものは一つありません。シンプルなデザインはいかにもこれからのリハビリテーションの方向を暗示して、E・Jならではのオリジナリティーが感じられます。

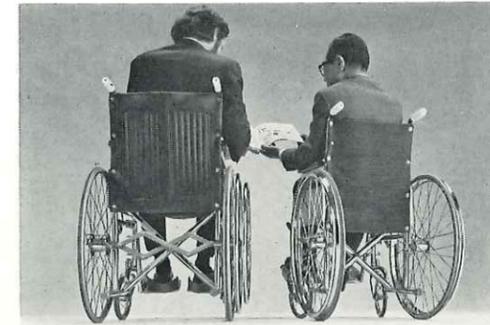

寸法一覧表



機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UBA 200-47-764	1283	870	755	248	503	457	623	247	406	573
UBAHE 200-760	844	1048	686	254	432	457	623	254	406	420
UBA 200-41-764	1283	820	755	247	503	457	673	292	406	547
UBA 200-47-764	1283	870	755	247	503	457	623	248	406	571
H8A 250-730	927	762	755	247	503	457	673	293	406	420
H8A 260-730	927	763	755	247	503	457	673	293	406	420
T8A 200-740	927	762	755	247	503	457	623	247	406	420
TBALW 200-740	927	762	755	247	503	457	623	248	406	420
T5T 200-740	921	838	648	178	477	337	495	248	292	470
S8A 200-700	927	1029	756	247	503	457	623	247	406	420
S8N 200-700	927	1029	755	247	503	406	571	248	406	420
P8AU 260-770	915	774	755	251	503	457	667	293	406	420
P8AU 260-47-774	1289	889	755	251	503	457	667	293	432	573
P8AU 200-31-770	915	775	755	251	503	457	718	387	406	420
P8AU 200-34-770	946	1118	755	251	521	457	648	343	406	420
P8AUSM-27S-770	876	1016 (1041)	787	254	533	432	648	248	343	293
P8AU 200-770	915	775	755	251	503	457	623	251	406	420
P8AULW 200-770	915	800	755	251	503	457	623	251	406	420



輸入元

住友商事株式会社



発売元

酒井医療販売株式会社

東京都文京区本郷3丁目31番7号 TEL (03) 814-0411(代) 113