

登 録




商 標

陸 軍 制 式

# 配電盤附電氣四肢浴裝置

(實用新案登録)

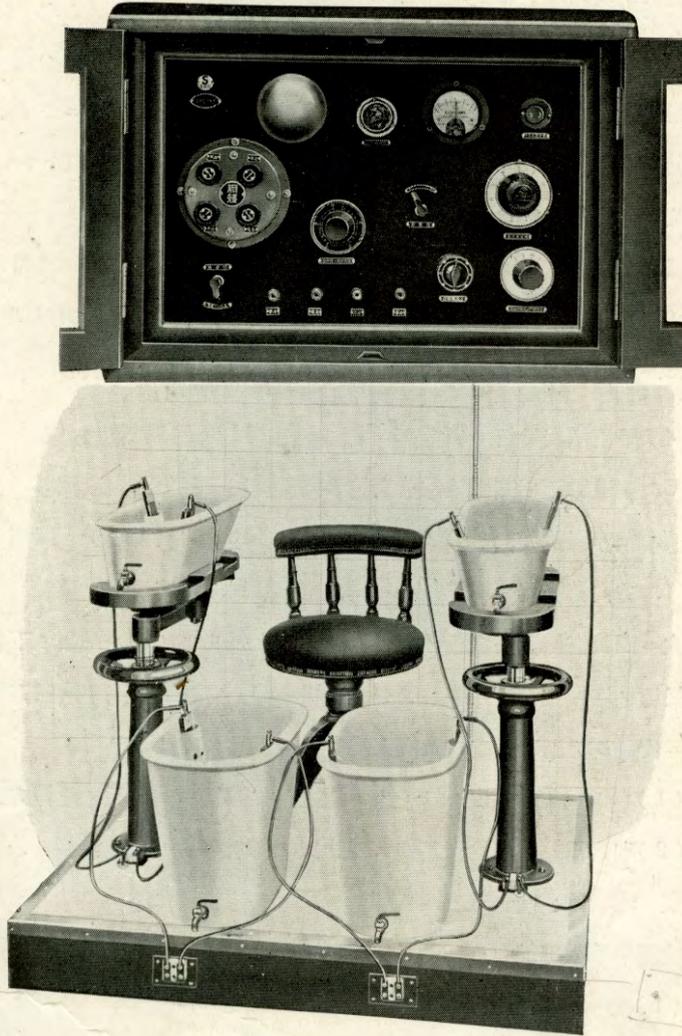

日本無線電信電話株式會社 總販賣店  
 シーメンス、ライニーゲル、ウエルケ會社 代理店  
 富士電機製造株式會社 特約店  
 東京醫療電氣機製造所

## 酒 井 信 正 商 店

東京市本郷區春木町二丁目十五番地  
 電話 小石川 (85) 三八八〇番

## 配電盤附電氣四肢浴裝置

**用途**…平流或ハ感傳電氣ヲ四肢ヲ通ジテ人體ニ流通セシムル一種ノ脫衣セザル全身電氣浴ナリ、故ニ別ニ特定ノ浴場乃至ハ脫衣場等ヲ要セザル極メテ至便ナル水浴療法裝置ナリ。

**構造**…本裝置ハ電源配電盤及四肢浴裝置ノ二部ヨリ成立ス、前者ハ乾燥セル堅材ヲ用キテ作ラレタル木枠ニヨリ包圍セラレタル黑色配電盤ニシテ、直接電燈會社ヨリ供給セラル交流100Vヲ整流シテ得タル直流ヲ電源トシ、之レヲ平流及感傳ノ電源トセルモノニシテ其レ等ノ器械部ハ次ノ如シ。

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. 精密ミリアンメーター    | 8. 平流、感傳切換器   |
| 2. 同上用倍數器        | 9. 感傳開閉兼強弱調節器 |
| 3. 電源接續器         | 10. 感傳用斷續器    |
| 4. 平流用表示灯        | 11. 眞空管整流裝置   |
| 5. 平流電源用開閉兼電壓調整器 | 12. 酸化銅整流裝置   |
| 6. 精密抵抗器         | 13. 四肢用端子 四個  |
| 7. 方向轉換器         | 14. 選流用配線盤    |

次ニ四肢浴裝置ハ白色ノ大ゴム板ヲ以テ張リツメタル一側ノ下敷台上ニ鐵製黒塗ノ浴槽支持臺二個、同ジク腰掛一個ヲ有シ、上肢用陶器浴槽ハ之ノ臺上ニ安置シテ上下、左右及高底等自由ニ調整スルコトヲ得。

**特長**…(1)本配電盤ニ固定セラレタル選流用配線盤ハ數十種ノ配線方式ヲ支配ス。  
(2)陶器槽ハ排水栓ヲ具備スルヲ以テ排水容易ナリ。

**附屬品**…炭素電極 八個 防水導線 八本  
金屬導管入導線 一組 電源コード 一組

**寸法及重量**…(1)配電盤

間口 2尺01分 高サ 1尺6寸 奥行 9寸5分 重量 6貫

(2)四肢浴裝置

下敷臺ノ大サ……3×3.5尺 高サ 6寸

全部ノ重量……約二十貫

**所要電量**…單相交流100V. 50—60サイクル 3アンペア

**適應症**…神經衰弱、動脈硬化症、冷へ症、血管神經症