



WOODWAY®
For The Long Run®

WOODWAYは、1975年にドイツにて創業。
1990年からはアメリカを拠点に、欧米を中心にトレッドミルを供給しています。
酒井医療株式会社は1983年より国際パートナーとして、
ライセンス生産、輸入販売を長期にわたり行っています。

世界のトップアスリート
トレーナーに選ばれたトレッドミル

WOODWAY®
For The Long Run®



*Dynamic and low impact
workout every time.*



酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

札幌営業所	(北海道)	Tel: 011-780-5570
盛岡営業所	(青森・秋田・岩手)	Tel: 019-656-5336
仙台営業所	(宮城・山形・福島)	Tel: 022-390-6840
新潟営業所	(新潟)	Tel: 025-278-4777
長野営業所	(山梨・長野)	Tel: 0263-40-5014
埼玉営業所	(埼玉・群馬・栃木)	Tel: 048-662-4560
千葉営業所	(千葉・茨城)	Tel: 047-497-3691
東京営業所	(東京)	Tel: 03-5227-5779
	(フィジオ)	Tel: 03-5227-5776
横浜営業所	(神奈川・静岡)	Tel: 045-590-5485
名古屋営業所	(愛知・岐阜・三重)	Tel: 052-263-9867
金沢営業所	(石川・富山・福井)	Tel: 076-292-1161
関西営業所	(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)	Tel: 06-6386-3545
神戸営業所	(兵庫)	Tel: 078-579-6236
広島営業所	(広島・岡山・山口・鳥取・島根)	Tel: 082-830-0420
高松営業所	(香川・徳島・愛媛・高知)	Tel: 087-865-0715
福岡営業所	(福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄)	Tel: 092-588-9331
鹿児島営業所	(鹿児島・宮崎)	Tel: 099-219-7250

取扱店

US treadmill brand recognized by the world's top league

世界のトップリーグが認めた 米国製トレッドミルブランド

WOODWAY®

For The Long Run®

ウッドウェイは米国のプロスポーツチームMLB、NBA、NFLの全チームをはじめ、NHL、有名大学など、様々なスポーツ施設へ導入されている、確かな品質と信頼のトレッドミルトップメーカーです。

Woodway is a reliable treadmill top manufacturer with reliable quality and reliability that has been introduced to various sports facilities including the US professional sports team MLB, NBA, NFL all teams, NHL, well-known universities and so on.

下肢への負担・エネルギーロス・製品の耐久性の課題

対策は“**衝撃・摩擦・ロスの軽減**”にあります

3つの 軽減課題

1 ベルトと足の着地 **衝撃**

一般的なベルトは数mmの厚さしかないため、着地時の足部への衝撃が大きい

2 ベルトとデッキ **摩擦**

ベルトとデッキプレートは常に摩擦しており、着地時はさらに摩擦が大きくなる

3 ベルトとローラー **運動ロス**

ローラーとベルトがスリップして伸び縮みを繰り返して消耗、駆動のエネルギーロスも起こる



解決したのは **WOODWAY® 独自技術**

3つの課題を解決した「**スラットベルト方式ベルトシステム**」

3つの 独自技術

1 クッション **衝撃を吸収**


厚さ8mmの特殊弾力ゴムで足への衝撃を吸収

2 ベアリング **摩擦を低減**

ベルトとの接触面と、摩擦を最小限に

3 ギア **ロスの無い駆動**

歯車と歯付きベルトの組み合わせで、正確な駆動を実現

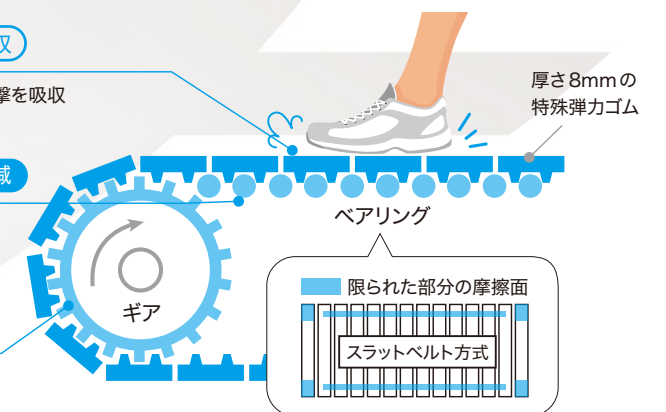

厚さ8mmの衝撃吸収ベルトクッションを採用。足首、膝、その他関節、筋、接合組織への衝撃を和らげ、**ケガなどを防ぐ**ことから、世界トップレベルのアスリートたちがウッドウェイ社のトレッドミルを愛用しています。



200個以上にも及ぶベアリングを施しているスラットベルト方式は、ベルトとの摩擦部分を最小限にとどめ、**摩擦熱の影響をほとんど受けけない**ため、約30万kmを走行してもベルト交換の必要が無い、**高い耐久性を可能にしました**。

※ ゴムベルト方式は約6万～10万kmでベルト交換が必要になると言われています



スラットベルト方式のギアは接地時の瞬間的な速度変動が少ないため**速度を安定して維持**。設定速度を正確に維持できるので、トレーニング時の運動量の目標設定も容易で、**ベルトの寄り、張りの調整も必要ありません**。

- ① 衝撃軽減
- ② 運動エネルギーロス軽減
- ③ 安定した自分のペース

- 1. Shock reduction
- 2. Kinetic energy loss reduction
- 3. Stable self pace



カーブ
WWT-100 / WWT-150

“自然な感覚”

WOODWAY 社製だからこそ得られる

A natural sensation that can be obtained because it is made by WOODWAY

自走式トレッドミルは走者が自らの力でペースを調整できることから、走行する本来の自然な感覚が得られ、リハビリテーションやスポーツトレーニング、フィットネスに最も適したトレッドミルです。
電動式トレッドミルと比較して同時間の運動でも酸素消費量が高く、効率の良いワークアウトが実現できます。

最高速度の制限がなく、数歩の加速ですぐに全力での走行が可能。スポーツパフォーマンスに特化したトレーニング、インターバルトレーニングに有効です。

速度制限無しのフィットネスマシン

最高速度に制限がなく、走者の快適な速度でのワークアウトを実現します。

電源不要・省スペース

本体稼働に外部電源は必要ありません。
電力ランニングコストの低減と、電源配置を気にせず設置できるため、レイアウトも自在です。

シンプルディスプレイ

時間・走行速度・走行距離・カロリー・ペース・ラップ・心拍数等を表示できます。

外部出力機能付モデル WWT-150

デジタル速度出力（USB インターフェイス）機能付き自走式トレッドミルと専用ソフトウェアの組み合わせにより、接続した PC から走行速度や走行距離、心拍数（ポラール使用時）の変化をグラフやレポートで確認することが可能です。
また、経過時間ごとの速度目標を設定した運動メニューや、過去の走行データと比較しながら運動することで自走式トレッドミルでありながら定量的な運動評価が可能です。※PC 別途必要



電動／自走 可変式トレッドミル

※一部モデルを除く

電動から自走式（ダイナミックモード）にもワンタッチで変更可能なモデル。
自走式時の負荷は独自のシステム（ブレーキングモード）により 0～20 段階で調整可能。

Manually driven and its resistance can be regulated from 0 to 20



4FRONT WWT-500
全米のトップトレーナーが認めたトレッドミル



path WWT-400
全長 1500mm の省スペーストレッドミル
※ダイナミックモードのみ



Pro/ProXL WWT-700
傾斜 25%・最高速度 24km/h のアスリート向けトレッドミル
XL：走行面が長いタイプ



ELG WWT-300
プロフェッショナル志向の最高速度 40km/h、傾斜最大 35% のスーパートレッドミル

4Front / Path / Pro / ProXL は、2種類の操作パネルから選択できます。

パーソナルトレーニング	標準
・速度 / 傾斜 / 距離 / 時間 / 心拍 LED 表示 ・10 種類のトレーニングプログラム ・8 種類のテストプログラム	・速度 / 傾斜 / 距離 / 時間 心拍 LED 表示



4FRONT・Pro/ProXL
パーソナルトレーニングパネル



path
パーソナルトレーニングパネル

	Curve	4Front	Path	Pro	Pro XL	ELG
型式	WWT-100 WWT-150	WWT-500P WWT-500	WWT-400P WWT-400	WWT-600P WWT-600	WWT-700P WWT-700	WWT-300
ベルト面 (mm)	1500×430	1520×550	1120×550	1520×700	2030×700	2060×700
傾斜 (%)	-	0～15	0～15	0～25	0～25	-5%～35
速度 (km/h)	自走	0～20	0～18	0～24	0～24	0～40
電源	-	AC100V (15A)	AC100V (15A)	AC200V (15A)	AC200V (15A)	AC200V (30A)
外形寸法 (mm/L×W×H)	1730×790×1730	1830×890×1630	1500×970×1520	1930×1220×1730	2390×1220×1780	2590×1220×2010
質量 (kg)	161	202	167	261	307	736
耐荷重	走行時 180kg / 歩行時 360kg (6km/h 以下)					
操作パネル	カーブ用パネル	パーソナルトレーニングパネル ※1 / 標準パネル				パーソナルトレーニングパネル
心拍 (脈拍)	ポラール ※2	グリップ式 / ポラール ※2				
電動／自走式切替 (自走式搭載モード)	自走式のみ	電動／自走式 (ダイナミック／ブレーキング)	電動／自走式 (ダイナミックのみ)	電動／自走式 (ダイナミック／ブレーキング)		電動のみ

※1 型式末梢に P があるタイプ ※2 ポラールは付属していません