

小規模施設様向け

フィジオパックウォーマー (ミニ) パックワゴンセット

フィジオパックウォーマー(ミニ)とワゴン、人気のパックをバランスよくまとめたオススメのセットです。使いやすいMサイズが2枚、肩・腰など頻りに使う人気・売上No.1のLサイズが4枚、背中など広い範囲をしっかりとカバーできるLLサイズが2枚。様々なシーンに対応する計8枚のセットです。



型式:PPW-M01-B



M × 2

L × 4

LL × 2



| パックワゴンセットに含まれる内容 | 数量 |
|---------------------|------|
| フィジオパックウォーマー(ミニ) | × 1台 |
| フィジオパック M | × 2個 |
| フィジオパック L | × 4個 |
| フィジオパック LL | × 2個 |
| フィジオパックウォーマー(ミニ)ワゴン | × 1台 |



フィジオパック S

| | |
|------|---------------|
| 本体重量 | 260g |
| 本体寸法 | W165×H105(mm) |

医療機器届出番号
11B1X10028PP0001

※交換用カバーのみ
フィジオパック カバー-S



フィジオパック M

| | |
|------|---------------|
| 本体重量 | 940g |
| 本体寸法 | W270×H150(mm) |

医療機器届出番号
11B1X10028PP0002

※交換用カバーのみ
フィジオパック カバー-M



フィジオパック L

| | |
|------|---------------|
| 本体重量 | 1300g |
| 本体寸法 | W585×H150(mm) |

医療機器届出番号
11B1X10028PP0003

※交換用カバーのみ
フィジオパック カバー-L



フィジオパック LL

| | |
|------|---------------|
| 本体重量 | 1500g |
| 本体寸法 | W350×H310(mm) |

医療機器届出番号
11B1X10028PP0004

※交換用カバーのみ
フィジオパック カバー-LL

使用目的、効能又は効果

・消炎鎮痛処置(温熱治療) ・打撲、捻挫等 ・筋疲労や疼痛、肩こり等 ・血行改善等



酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 札幌営業所 (北海道) | Tel: 011-780-5570 |
| 盛岡営業所 (青森・秋田・岩手) | Tel: 019-656-5336 |
| 仙台営業所 (宮城・山形・福島) | Tel: 022-390-6840 |
| 新潟営業所 (新潟) | Tel: 025-278-4777 |
| 長野営業所 (山梨・長野) | Tel: 0263-40-5014 |
| 埼玉営業所 (埼玉・群馬・栃木) | Tel: 048-662-4560 |
| 千葉営業所 (千葉・茨城) | Tel: 047-497-3691 |
| 東京営業所 (東京) | Tel: 03-5227-5779 |
| 東京営業所 (フィジオ) | Tel: 03-5227-5776 |
| 横浜営業所 (神奈川・静岡) | Tel: 045-590-5485 |
| 名古屋営業所 (愛知・岐阜・三重) | Tel: 052-263-9867 |
| 金沢営業所 (石川・富山・福井) | Tel: 076-292-1161 |
| 関西営業所 (大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山) | Tel: 06-6386-3545 |
| 神戸営業所 (兵庫) | Tel: 078-579-6236 |
| 広島営業所 (広島・岡山・山口・鳥取・島根) | Tel: 082-830-0420 |
| 高松営業所 (香川・徳島・愛媛・高知) | Tel: 087-865-0715 |
| 福岡営業所 (福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄) | Tel: 092-588-9331 |
| 鹿児島営業所 (鹿児島・宮崎) | Tel: 099-252-5251 |

取扱店

PHYSIO PACK.

Blacksilica・Tera stone



温熱用パック フィジオパック
一般医療機器(クラスI)温熱用パック
(JMDNコード:37240010)

温熱治療をもっと手軽に、 もっと効率的に。

ホットパック治療にかかる手間を最大限省きました。
施術者は使いやすく。温熱の心地よさはそのままに。
理想のホットパックを追求した形です。



コンセントの位置を気にせず、
どこでも治療が可能です。

厳選した素材を詰め込んだ、鉱石ホットパック

フィジオパックは、厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用したホットパックです。遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合を調整しました。この貴重な鉱石たちが心地よい温感、体感を実現します。

ブラックシリカ
black silica
海底に堆積した珪藻類から生成された黒鉛を含む珪質岩石。



磁器セラミックボール
ceramic ball
鉱物などを粉状にした原料を球体に成形して焼き上げた磁器。




トルマリン
tourmaline
トルマリンの結晶を熱すると電気を帯びる事から日本名で「電気石(でんきせき)」と呼ばれる鉱石。



ゼオライト鉱石
zeolite
吸着・吸湿性に優れ、脱臭剤としても利用される、多くのミネラルを含んだ鉱石。



ゲルマニウム鉱石
germanium
元素のひとつゲルマニウムを含有する鉱石。

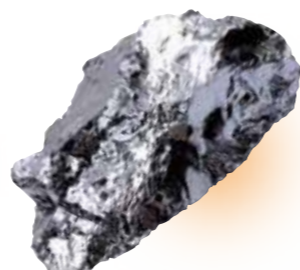

テラ鉱石
tela stone
岩盤浴などにも使用される密度の高い天然鉱石。

身体にフィットするサイズバリエーション

小さなSサイズから、広い範囲を効率よく温めるLLサイズまで、4種類のラインアップ。全身の様々な部位をカバーします。



フィジオパック S



フィジオパック M




フィジオパック L




フィジオパック LL

複数の鉱石が生み出す温度持続力

パックの温度をより高温で長時間持続させるために様々な素材や配合量を検証しました。その結果たどり着いた、5種類の鉱石と磁器セラミックボールの配合。1種類の鉱石のみを使用したパックよりも長時間高い温度を維持することを可能にしました。

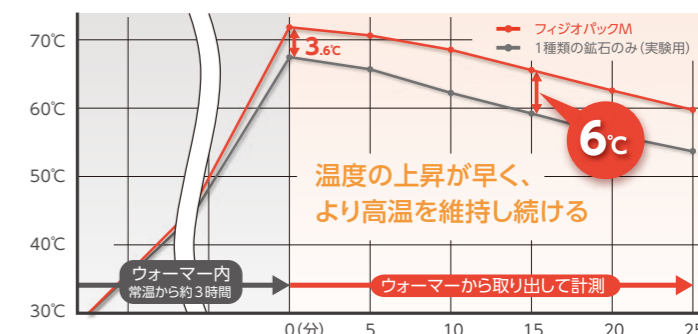

※フィジオパックMと1種類の鉱石のみのパック(実験用)を計測したデータ。
2回計測した平均値を表示。

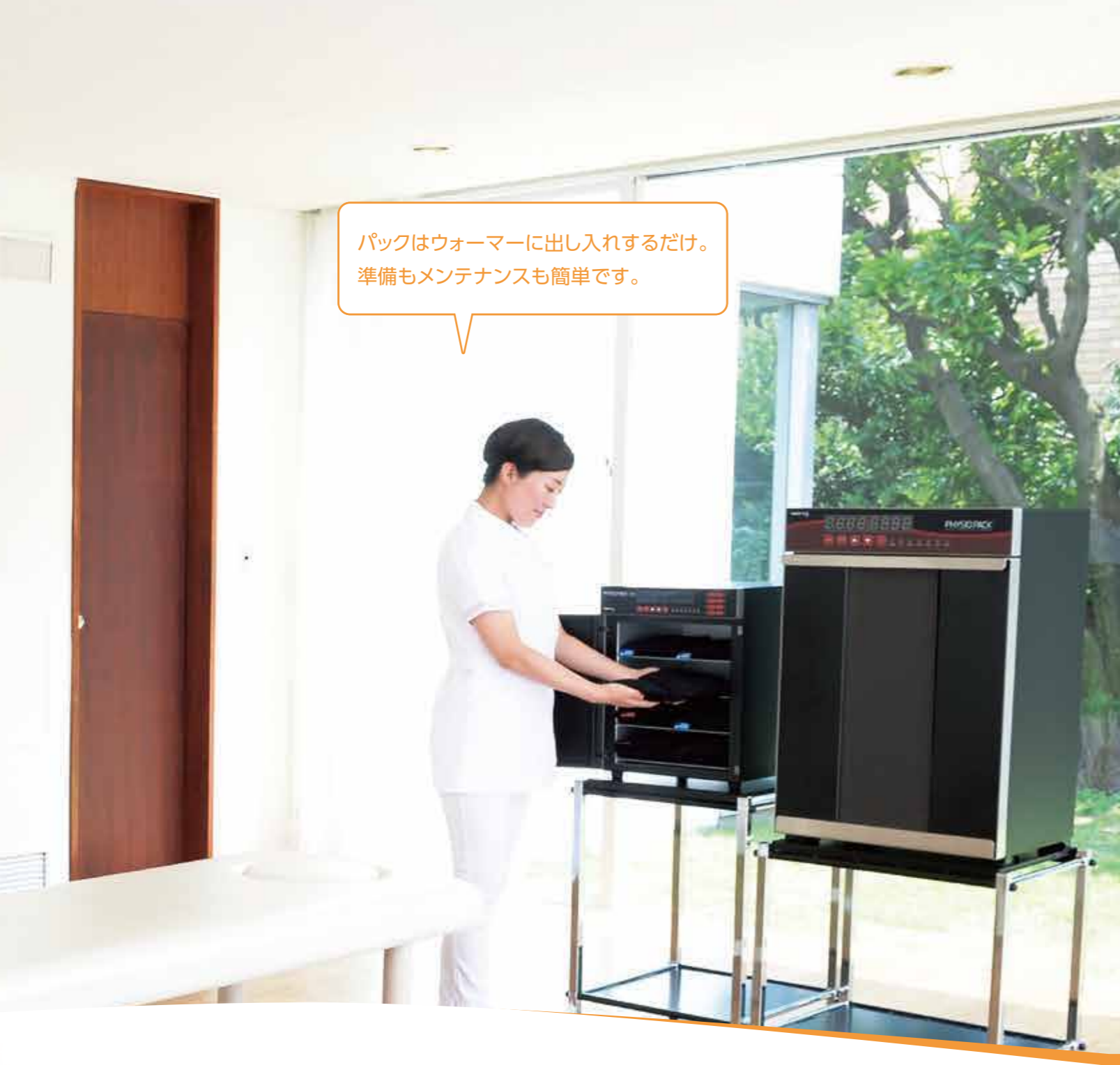

パックはウォーマーに出し入れするだけ。
準備もメンテナンスも簡単です。

使いやすく低ランニングコストの パックウォーマー

一般的な湿式のパックウォーマーに比べて消費電力は約3分の1。最大80℃の高温設定ながら低ランニングコストを実現しました。また、標準装備のトレーでパックの整理も簡単です。さらに水を使わないので配管の必要も無く、電源だけで使用することができます。

| 方式 | ウォーマー種類 | 消費電力 |
|----|-----------------|------------|
| 乾式 | フィジオパックウォーマー | 440W |
| | フィジオパックウォーマー ミニ | 440W |
| 湿式 | 一般的なウォーマー | 1000~1400W |

低ランニングコスト

パックのメンテナンス、 使い勝手にもこだわりました

内袋を専用カバーから取り外して洗濯することができるので、いつでも清潔に保つことができます。また、S~LLまで色違いの大きなタグをカバーに採用。ウォーマーから取り出すときも、ひと目で分かるようになっています。



用途に合わせて選べる 2種類のパックウォーマー。

収納力に優れたフィジオパックウォーマーと、コンパクトなフィジオパックウォーマー ミニ。ご利用の頻度や、設置場所に合わせて選択が可能です。パックの出し入れがしやすい高さに設置できる、専用のワゴンもご用意しています。



約21枚収納できる 安心の大容量タイプ。

フィジオパック ウォーマー
(PPW-02)



収納の手間を省く7段トレー

1段にフィジオパックM~LLを3枚並べて収納できる7段のトレーを標準装備。余裕のある棚間で取り出しも収納もスムーズに行えます。



7段トレー

タイマー機能

最大温度80℃

庫内容量75ℓ

曜日ごとに設定できるタイマー

診療時間に合わせて電源のON/OFFが可能なタイマー機能を搭載。診療開始時には自動的にしっかりと温まったパックが用意できます。



コンパクトかつ、 高性能を実現したミニ。

フィジオパックウォーマー(ミニ)
(PPW-M01)



スペースを選ばない小型タイプ

トレーや、タイマー機能、最大温度など、通常のウォーマーと変わらない機能を持ちながら横幅約36cmのミニサイズウォーマー。8個のパックが収納できます。



4段トレー

タイマー機能

最大温度80℃

庫内容量33.7ℓ

時間経過LED

温まったパックがすぐ分かる

フィジオパックをウォーマーに入れてから何分経ったか、ひと目で分かるLEDが付いています。手で触って確かめなくても、LEDの色で確認が可能です。



| | |
|--------|-------------------------|
| 定格電源 | AC100V |
| 消費電力 | 440W |
| 本体寸法 | W505 × H765 × D430(mm) |
| 庫内寸法 | W410 × H560 × D325(mm) |
| 本体質量 | 43kg(本体38.5kg、トレー5.6kg) |
| 庫内容量 | 75ℓ |
| 温度調節幅 | 40℃～80℃(過温防止装置付) |
| タイマー機能 | ON / OFFデジタルタイマー |
| 動作環境 | 温度:10℃～30℃ / 湿度:70%以下 |
| 付属品 | トレー7枚、電源ケーブル1本 |

※フィジオパックウォーマーは医療機器ではありません。



フィジオワゴン (PW-PP1)

本体寸法/W590×H600×D480 (mm)

| | |
|--------|---------------------------|
| 定格電源 | AC100V |
| 消費電力 | 440W |
| 本体寸法 | W360 × H478 × D420(mm) |
| 庫内寸法 | W300 × H352 × D320(mm) |
| 本体質量 | 16.9kg(本体14.0kg、トレー2.9kg) |
| 庫内容量 | 33.7ℓ |
| 温度調節幅 | 40℃～80℃(過温防止装置付) |
| タイマー機能 | ON / OFFデジタルタイマー |
| 動作環境 | 温度:10℃～30℃ / 湿度:70%以下 |
| 付属品 | トレー4枚、電源ケーブル1本 |

※フィジオパックウォーマー(ミニ)は医療機器ではありません。



フィジオパックウォーマー(ミニ)
ワゴン (PW-PP2)

本体寸法/W410×H700×D480 (mm)